


# Hoe kun je spreken met een doorkijkraam?

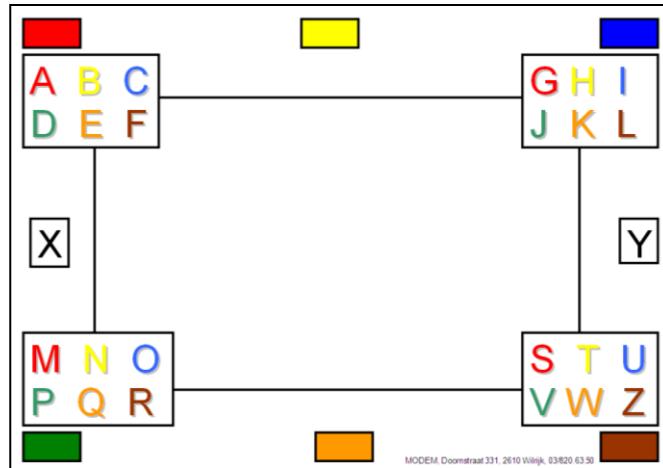


Op pagina drie staat dit kader in een A4 formaat.

## Werkwijze

De persoon met een communicatieprobleem wilt bijvoorbeeld het woord 'DAG' vormen.

## De letter 'D'


### Stap 1:

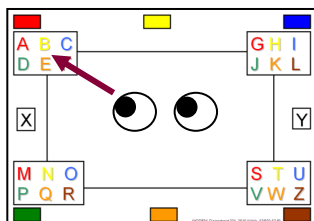

Luisteraar vraagt: welke groep?

De persoon kijkt naar het kaartje linksboven dat de letter 'D' bevat. Zo weet de luisteraar dat het één van deze zes letters is.

### Stap 2:

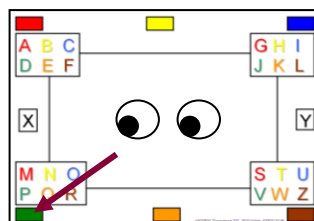

Luisteraar vraagt: welke plaats?

De persoon kijkt naar linksonder (in ons voorbeeld is dat de groene rechthoek). Zo weet de luisteraar dat het de D is.

Luisteraar zegt: de D (zo weet de persoon dat de luisteraar dit correct heeft begrepen).


## Modem

Doornstraat 331, B-2610 Wilrijk  
Tel.: 03 820 63 50  
Fax: 03 828 69 64  
E-mail: [modem@vzwkinsbergen.be](mailto:modem@vzwkinsbergen.be)

Bezoek onze website: <http://www.modemadvies.be>  
Schrijf je in voor de nieuwsbrief: [modem@vzwkinsbergen.be](mailto:modem@vzwkinsbergen.be)  
Volg ons op Facebook: <http://www.facebook.com/modemvzw>

## De letter 'A'

### Stap 1:

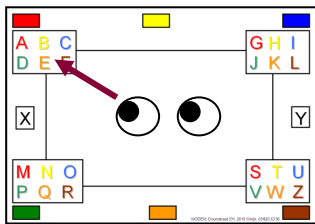

Luisteraar vraagt opnieuw: welke groep?

De persoon kijkt naar het kaartje linksboven dat de letter 'A' bevat. Zo weet de luisteraar dat het één van deze zes letters is.

### Stap 2:


Luisteraar vraagt: welke plaats?

De persoon kijkt opnieuw naar linksboven (in ons voorbeeld is dat de rode rechthoek). Zo weet de luisteraar dat het de A is.

Luisteraar zegt: de A (zo weet de persoon dat de luisteraar dit correct heeft begrepen).

## De letter 'G'


### Stap 1:

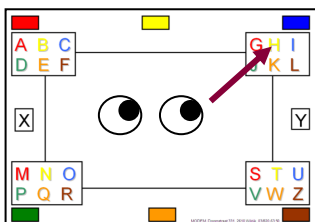

Luisteraar vraagt opnieuw: welke groep?

De persoon kijkt naar het kaartje rechtsboven dat de letter 'G' bevat. Zo weet de luisteraar dat het één van deze zes letters is.

### Stap 2:

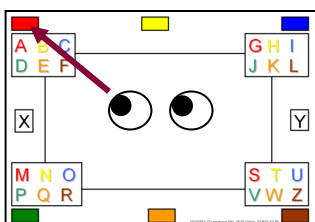

Luisteraar vraagt: welke plaats?


De persoon kijkt naar linksboven (in ons voorbeeld de rode rechthoek). Zo weet de luisteraar dat het de G is.

Luisteraar zegt: de G (zo weet de persoon dat de luisteraar dit correct heeft begrepen).

## Modem

Doornstraat 331, B-2610 Wilrijk  
Tel.: 03 820 63 50  
Fax: 03 828 69 64  
E-mail: [modem@vzwkinsbergen.be](mailto:modem@vzwkinsbergen.be)

Bezoek onze website: <http://www.modemadvies.be>  
Schrijf je in voor de nieuwsbrief: [modem@vzwkinsbergen.be](mailto:modem@vzwkinsbergen.be)  
Volg ons op Facebook: <http://www.facebook.com/modemvzw>

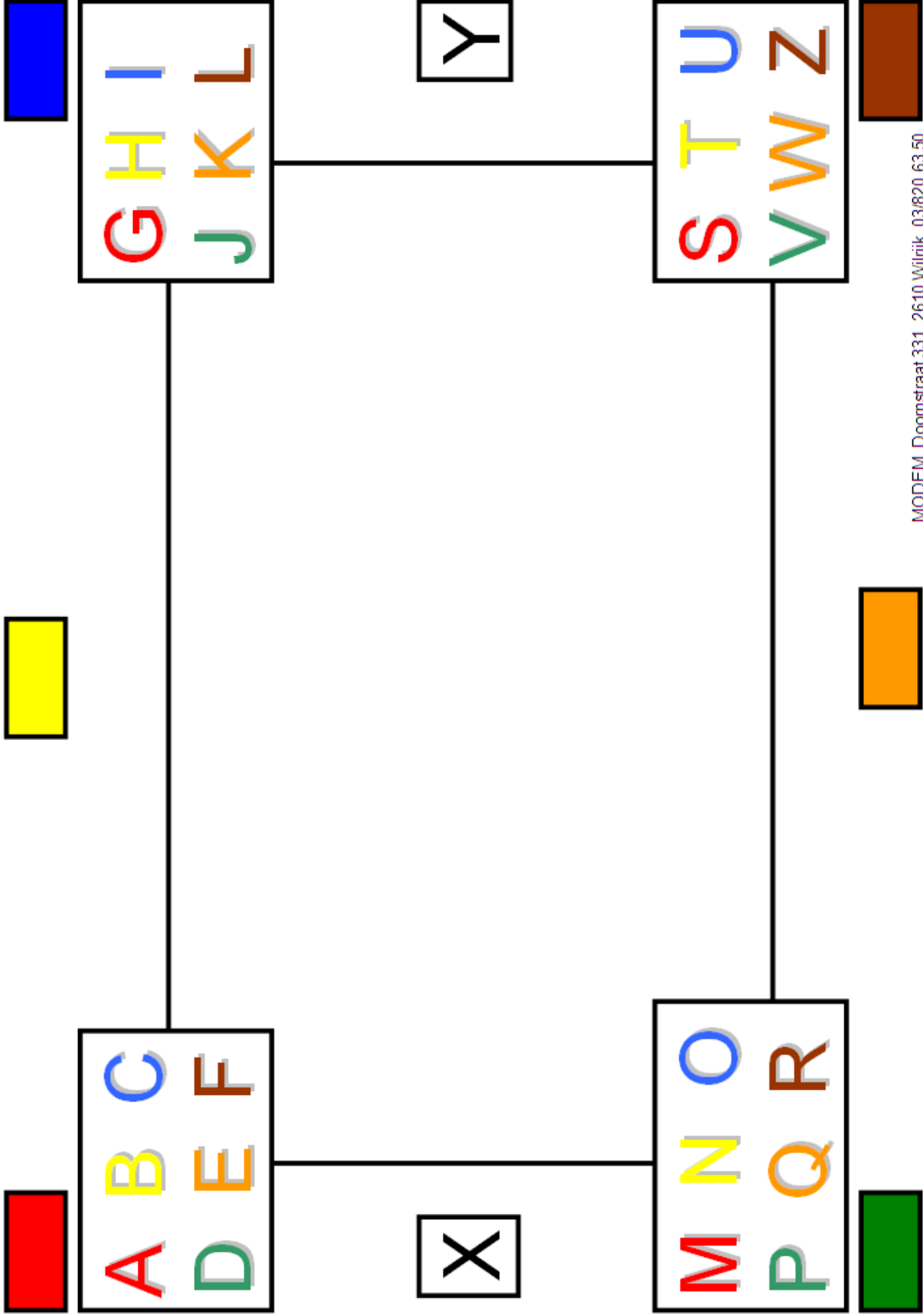

## Afmetingen/materiaal


Een doorkijkraam kun je op verschillende manieren en groottes maken. Hou bij het ontwerpen rekening met de zit- of lighouding van de gebruiker. Zorg ervoor dat hij comfortabel zit en bijvoorbeeld het hoofd niet te veel moet oprichten.

## Lamineren

Je kunt het voorbeeld van de vorige pagina afdrukken. Knip het midden eruit. Lamineer vervolgens het kader. Je kunt ook eerst lamineren en pas nadien knippen. Nu heb je een eenvoudig en meeneembaar doorkijkraam.



## Aangepaste spiegel

Soms is door het doorkijkraam kijken lastig. Vooral als je de letters en kleuren niet allemaal weet staan. Je kunt dit oplossen door de letters en gekleurde vlakken op een rechthoekige spiegel te bevestigen. Op deze manier kun je naast of achter je gesprekspartner staan en mee in de spiegel kijken.

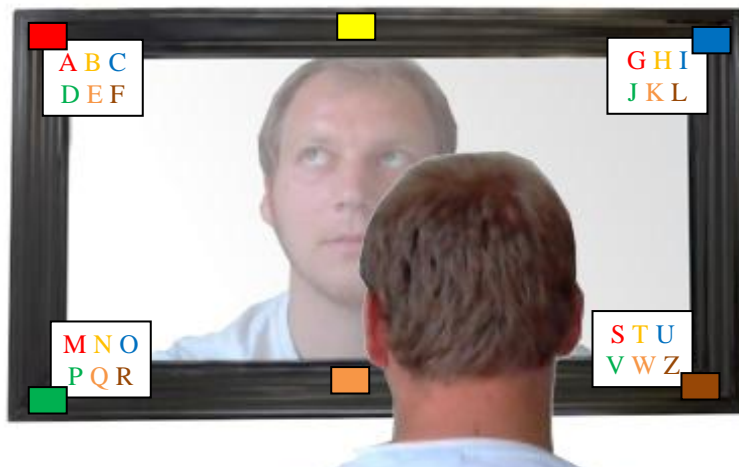

## Plexiglas

Voor een steviger doorkijkraam kun je met plexiglas werken. Hieronder vind je voorbeeldafmetingen voor een 'groot' doorkijkraam in plexiglas (dikte  $\pm 4$  mm). Vergeet ook niet een bijhorende voet te maken waarin het doorkijkraam kan blijven staan.

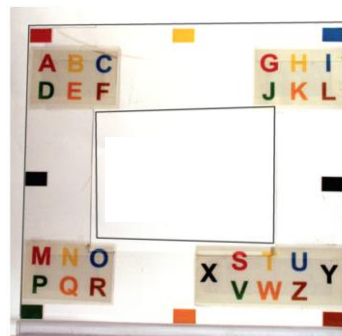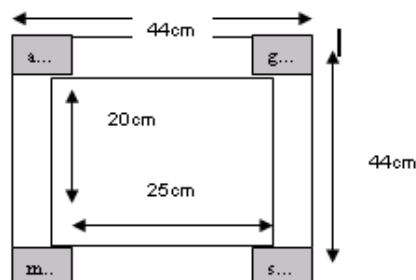

## Modem

Doornstraat 331, B-2610 Wilrijk  
Tel.: 03 820 63 50  
Fax: 03 828 69 64  
E-mail: [modem@vzwkinsbergen.be](mailto:modem@vzwkinsbergen.be)

Bezoek onze website: <http://www.modemadvies.be>  
Schrijf je in voor de nieuwsbrief: [modem@vzwkinsbergen.be](mailto:modem@vzwkinsbergen.be)  
Volg ons op Facebook: <http://www.facebook.com/modemvzw>

## Doorkijkraam in PVC

Een goedkopere oplossing is om een doorkijkraam in PVC te maken. Het materiaal dat je daarvoor nodig hebt, kun je vinden in een doe-het-zelf-zaak.

### Materiaal

- 2 m PVC buis 32 mm doorsnede (te verdelen in 1 x 55 cm, 2 x 45 cm en 4 x 13 cm)
- 2 PVC buis bochten van 90° (32 mm doorsnede)
- 4 PVC buis T-stukken 90° (32 mm doorsnede)
- 4 einddoppen PVC (32 mm doorsnede)
- 1.50 m velcro
- Voor extra versteviging onderaan is extra materiaal nodig: 120 cm buis en 2 T-stukken

### Werkbeschrijving

*Met dank aan Eelke Verschuur voor deze werkbeschrijving.*

De verschillende onderdelen volgens de werktekening in elkaar schuiven. Indien nodig het geheel met wat lijm vastzetten.

Vervolgens de buizen van 55 en 45 cm aan één zijde met velcro bekleven.



Om het frame meer stevigheid te geven en om meer mogelijkheden voor het plaatsen van symbolen te krijgen, kan men met behulp van nog een extra stuk buis van 55 cm, twee stukken buis van 5 cm en 2 extra T-stukken een verbinding aan de onderkant van het frame maken (men heeft nu niet meer voldoende aan 2 m buis). Op die manier maak je als het ware pootjes eronder.

De hoogte en breedte van het frame zijn individueel aanpasbaar. Houd bij het bepalen van de juiste maat er rekening mee dat de PVC buis ongeveer 2 cm in de koppelstukken en bochten komen.

---

## Modem

Doornstraat 331, B-2610 Wilrijk  
Tel.: 03 820 63 50  
Fax: 03 828 69 64  
E-mail: [modem@vzwkinsbergen.be](mailto:modem@vzwkinsbergen.be)

Bezoek onze website: <http://www.modemadvies.be>  
Schrijf je in voor de nieuwsbrief: [modem@vzwkinsbergen.be](mailto:modem@vzwkinsbergen.be)  
Volg ons op Facebook: <http://www.facebook.com/modemvzw>

## Werkwijze

Aan het frame kan speelgoed worden gehangen of vastgeplakt. Symboolkaartjes met aan de achter-bovenzijde voorzien van velcro kunnen rond het frame geplakt. Let er hierbij op dat de tekst ook op de achterzijde van de kaartjes staat. Deze is dan door de communicatiepartner te lezen zonder dat die hoeft op te staan.

## Doorkijakraam in hout

Je kunt ook een doorkijakraam in hout maken. Dit neemt best wel wat tijd in beslag en raden we daarom niet direct aan. Tenzij je voldoende handig bent en genoeg tijd hebt. Een houten doorkijakraam heeft als voordeel dat het erg duurzaam is.



Dit is onder andere te koop via [www.kompagne.nl](http://www.kompagne.nl).  
De richtprijs hiervan is € 190.

## Megabee



De Megabee is een doorkijakraam met een dubbele tekstdisplay en handige handvaten. Met behulp van de knopjes boven de handvaten, kan de letter waarnaar de patiënt kijkt geselecteerd worden. Op de display verschijnt de gekozen letter. Er kunnen ook zinnen worden opgeslagen die door letter/cijfercombinaties kunnen opgeroepen worden. Teksten die geschreven zijn met de Megabee kunnen via de computer als email of tekst gebruikt worden.  
Richtprijs is € 800.  
Vlaamse Verdelers: [www.hmc-nv.com](http://www.hmc-nv.com)

---

## Modem

Doornstraat 331, B-2610 Wilrijk  
Tel.: 03 820 63 50  
Fax: 03 828 69 64  
E-mail: [modem@vzwkinsbergen.be](mailto:modem@vzwkinsbergen.be)

Bezoek onze website: <http://www.modemadvies.be>  
Schrijf je in voor de nieuwsbrief: [modem@vzwkinsbergen.be](mailto:modem@vzwkinsbergen.be)  
Volg ons op Facebook: <http://www.facebook.com/modemvzw>